

Комплекс аппаратно-программный суточного
мониторирования ЭКГ по Холтеру «HOLTERLIVE» с
возможностью проведения дистанционного анализа ЭКГ
по ТУ 26.60.12-001-47907279-2017



ООО «Совтест АТЕ»

Предложение для дистрибьюторов

11.09.2019

HOLTERLIVE - легкий, миниатюрный, беспроводной Холтер-монитор ЭКГ от компании SOVTEST MEDICA.

Сочетание удобства для пациента, высокого качества измерений и низких эксплуатационных затрат делает HOLTERLIVE отличным выбором для диагностики нарушения сердечного ритма.

Сделано в России по немецкой технологии




HOLTERLIVE

**Регистрационное удостоверение Росздравнадзора:
№ РЗН 2019/8693 от 29.07.2019**

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Портативный холтер-монитор с внутренним электроснабжением;
- 3 отведения (I, II, III);
- Измерение ЭКГ с частотой 250 Гц (по умолчанию) и разрешением АЦП в 16 бит;
- Дополнительно измеряется ускорение ($\pm 2g$, 100 Гц по 3 осям), внутренняя температура датчика, сопротивление контактов;
- Срок работы от полного заряда аккумулятора – до 3 суток, время зарядки – 1 час;
- Размер с аккумулятором 57x52x11 мм;
- Вес с аккумулятором 38 г;
- Степень защиты: IP41

Подробнее на www.holterlive.ru

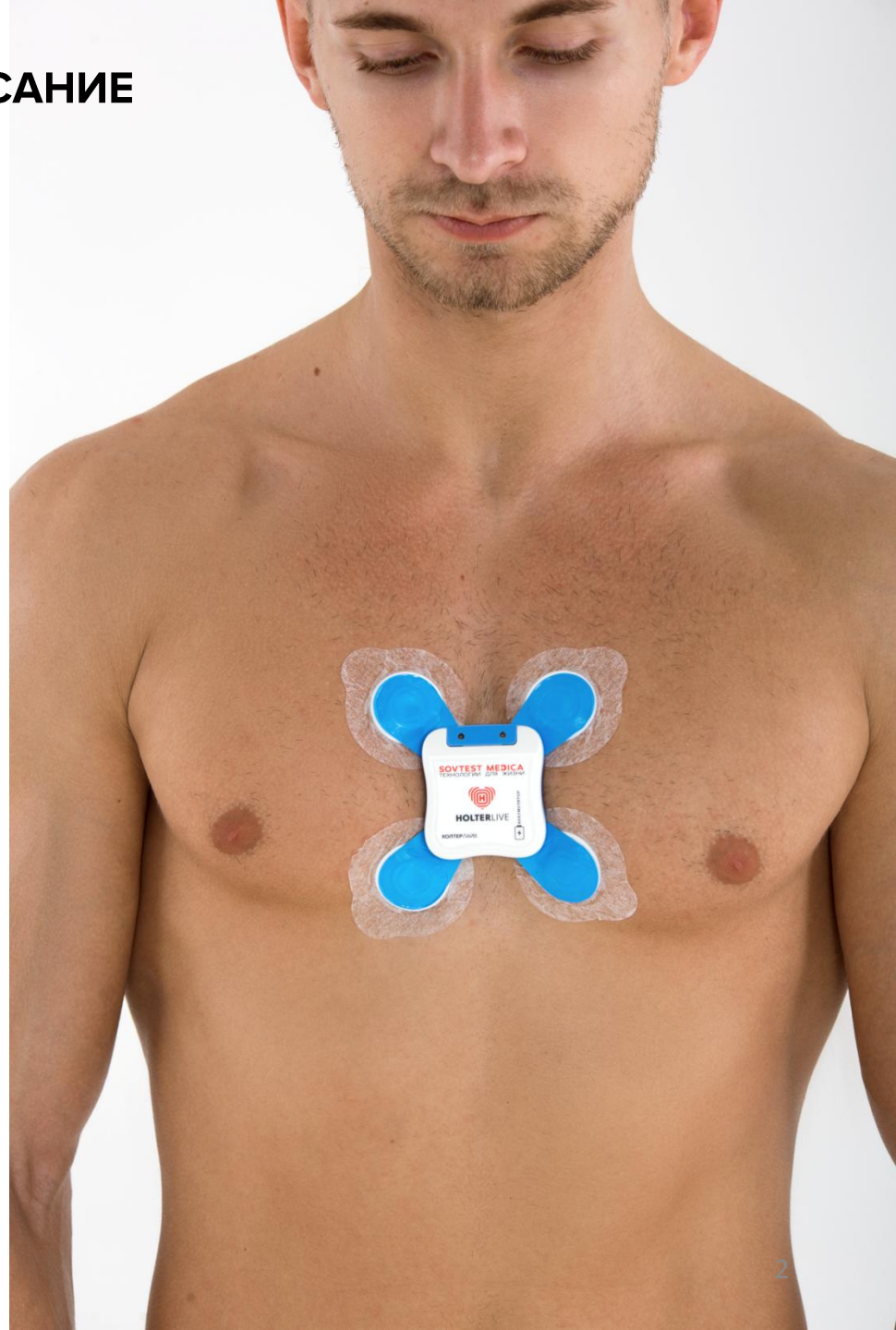

Преимущества для дистрибьюторов

1. Гарантируем фиксированные прайсовые цены для всех
2. Скидки дистрибьюторам до 40% (20% - на электроды; оргтехника продается по себестоимости) обеспечивают необходимую рентабельность продаж дистрибьютора
3. Защита проектов в момент получения заявки
4. Предоставляем пакет маркетинговых материалов: листовки, брошюры, видео, сайт, описание преимуществ
5. Гибкость в работе с заказчиками – наличие разных комплектаций в разных ценовых диапазонах
6. Уникальные характеристики регистратора (отсутствие проводов между регистратором и электродами) упрощают подготовку тендерной документации и увеличивают вероятность выигрыша на торгах
7. Обеспечиваем качественную и своевременную гарантийную поддержку Заказчика. При наступлении гарантийного случая производим своевременную замену прибора и/или комплектующих.



1. HOLTERLIVE настолько легкий и миниатюрный, что его не видно под одеждой.
2. Вес прибора всего 38 г, поэтому человек чувствует себя с ним комфортно, а по прошествии некоторого времени вообще перестает его замечать.
3. В отличие от обычных регистраторов для суточного мониторинга, HOLTERLIVE работает без кабелей. Он крепится на электроды с самоклеющимся основанием и размещается на груди пациента. Больше никаких дополнительных элементов не требуется.
4. Пациент может вести привычный образ жизни, не ограничивая физическую активность.
5. С HOLTERLIVE, по сравнению с обычным холтер-монитором, гораздо удобнее спать.
6. Пользовательские метки устанавливаются двойным постукиванием по регистратору. Никаких кнопок, механических элементов и выступающих частей.

Преимущества для врачей

1. Объем внутренней памяти HOLTERRLIVE и наличие в комплекте сменного аккумулятора позволяют проводить измерения продолжительностью до 28 суток.
2. Наличие полноценного контроля и анализа работы индивидуального водителя ритма.
3. Для обработки данных, полученных в ходе суточного мониторинга, используется высококачественное аналитическое ПО компании MEDSET (Германия). ПО полностью русифицировано.
4. Кроме того, HOLTERRLIVE совместим с двумя российскими программными продуктами, поддерживающими, в свою очередь, совместный анализ ЭКГ+АД:
 1. Safe Heart System-24h;
 2. Cardio-DM3 (Кардио-Астел).
5. Наличие встроенного акселерометра позволяет учитывать положение тела и физическую активность пациента при анализе ЭКГ.
6. Всё аналитическое ПО поддерживает интеграцию с современными медицинскими информационными системами.
7. Высокое качество исследования за счет использования высокоточных компонентов и отсутствия помех от проводов.
8. Статус и качество измерения постоянно отображаются с помощью цветных светодиодов. Качество измерения можно в любой момент проверить, подключившись к служебному ПО (на Windows или Android) через Bluetooth.
9. С помощью мобильного приложения «Easy ECG» пациент может записать ЭКГ длительностью от 30 секунд до 10 минут и отправить её для анализа своему лечащему врачу. При этом врач может в считанные минуты обработать полученные данные, сообщить результат пациенту и дать свои рекомендации.

Преимущества для больниц

- 1. Низкая стоимость владения.** В отличие от обычных регистраторов у HOLTERLIVE нет кабелей, соответственно, нет и затрат на их ремонт или замену.
Наиболее уязвимая часть у обычных регистраторов – это кабели. При постоянном использовании они изнашиваются, что вынуждает больницы осуществлять их ремонт и/или замену несколько раз в год. При стоимости кабелей от 2 000 до 20 000 рублей (в зависимости от модели холтер-монитора ЭКГ) общая сумма затрат на них за время эксплуатации прибора становится сопоставимой или даже превышает стоимость самого холтер-монитора.
- 1. HOLTERLIVE работает от аккумуляторной батареи.** Ее заряда хватает на непрерывное ведение записей до 3 суток. Наличие сменной батареи позволяет врачу сразу передать прибор следующему пациенту. Также в комплект HOLTERLIVE входит станция для подзарядки, позволяющая полностью зарядить аккумулятор за 1 час. Таким образом, не нужно постоянно приобретать одноразовые батарейки или пальчиковые аккумуляторы для проведения суточного мониторинга.
- 2. Стоимость комплекта HOLTERLIVE сопоставима со стоимостью проводных аналогов.**
- 3.** Применение стандартных электродов и наличие сменных аккумуляторов в комплекте максимально снижают затраты на эксплуатацию HOLTERLIVE.
- 4. Гарантия качества и сервис.** Производитель HOLTERLIVE компания «Совтест АТЕ» находится в России (г.Курск). Это позволяет осуществлять сервисную поддержку и гарантийную замену оборудования в максимально сжатые сроки.
- 5. Высокое качество производства.** Компания «Совтест АТЕ» является одним из ведущих российских разработчиков и производителей собственного оборудования и программного обеспечения, предназначенного для контроля качества продукции на различных стадиях производства. Соответственно, вся выпускаемая продукция также проходит все уровни контроля.
- 6. Обучение специалистов.** Компания готова обучать медицинский персонал клиник работе с HOLTERLIVE.

Мы заинтересованы в сотрудничестве с дистрибьюторами медицинской техники.

Контакт для связи:

Антон Сергеевич Григорьев

Тел. +7-4712-54-54-17, доб. 746

E-mail: info@holterlive.ru

www.holterlive.ru



HOLTERLIVE